


Vendredi 16 février 2018

Travail sur banc.

- Montage des tables micrométriques sous la plaque de base.
- Montage du miroir de sortie.
- Point source avec un collimateur fermé.
- Alignement "à l'oeil" de la concentricité des miroirs avec le point source.
- Alignement et focalisation au premier ordre.

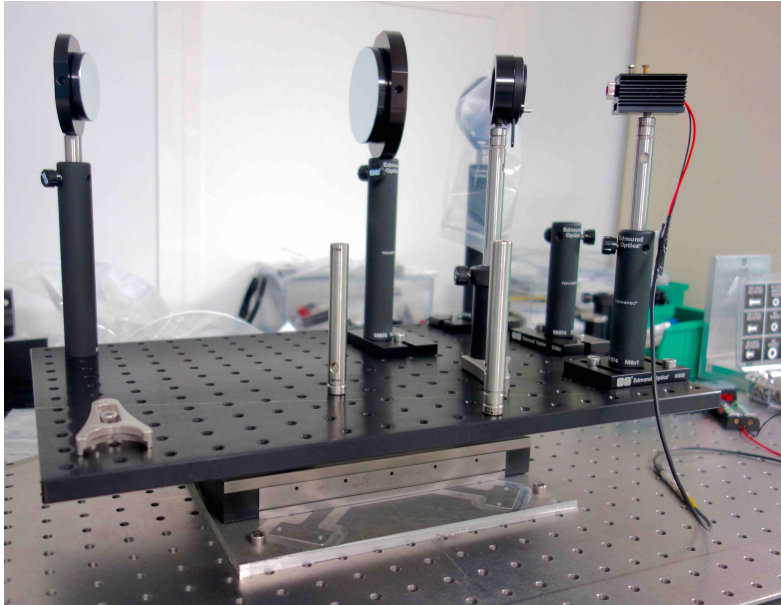

A faire

- Définir une procédure précise; pistes possibles:
 - Rendre les miroirs paraboliques mécaniquement solidaires. -> tiges + adaptateurs de filetage + rondelles (sur 3 côtés).
 - Mettre au point une procédure d'alignement non ambiguë.
- Monter la source (sphère intégrante + trou) sur une table micrométrique.